

水洗式ポータブルトイレ



介護保険補助
対象商品



特許取得商品

電動ポンプ圧送式水洗トイレ
ロボット介護推進プロジェクト対象機器

流せるポータくん

検索

レンタル はじめました。

北陸
東海・関西
関東

介護保険
対象商品

導入価格(介護保険利用時)

65,000円^{税込}

レンタル料(1ヶ月)

4,400円^{税込}

※上記金額は介護保険利用時の最小自己負担額です。

※特定福祉用具の購入補助の対象商品です。

※価格の詳細は、中面の価格表をご覧ください。

ベッドサイドに
置くことのできる
水洗トイレです。

※洗浄暖房便座は
オプションです。



もうバケツを持って
捨てに行く
必要はありません!

ポンとボタンを
押すだけで
水が後片付け!



水洗式ポータブルトイレ
「流せるポータくん3号」

選ばれている理由

臭いが
気になりません

気兼ねせずに
利用できます

後片付けが
いりません

硬質プラスチック、掃除がしやすく清潔・衛生

ポータブルポータくん 3号

仕様

寸法：幅36cm×高さ44cm×奥行71cm
座高：39cm(洗浄便座付きタイプ:42cm)
座面：幅39cm×奥行42cm
中バケツ容量：8ℓ
重量：18kg(体重制限80kg)
本体材質：FRP樹脂、ポリエチレン

品番：SPF15-3-PT

TAISコード：00994-000014

希望小売価格：¥100,000(税込)

※洗浄暖房温水便座(オプション)は希望小売価格¥50,000~になります。

※暖房便座(オプション)は希望小売価格19,500円になります。

「ポータブルポータくん3号」は専用の

③ポンプユニットを取付けることで

「水洗式ポータブルトイレ」としてご使用頂けます



価格表

(税込)

内 訳	品 名	通常価格	介護保険の補助を最大限に 受けた場合のご負担額
初回ご負担額	① ポータブルポータくん 3号 標準便座タイプ ご購入 品 番：SPF15-3-PT TAISコード：00994-000014	100,000円	10,000円 (1割)
	② 接続工事費	55,000円	55,000円
	合 計	155,000円	65,000円
月々のレンタル料	③ ポンプユニット レンタル	4,400円/月	4,400円/月

※洗浄暖房便座(オプション)は希望小売価格55,000円になります。
※お住まいの地域によっては別途、出張料を頂く場合があります。

価格の内訳


① ポータブルポータくん3号 標準便座タイプ



ご購入 いただきますので衛生面も安心です



② 接続工事費

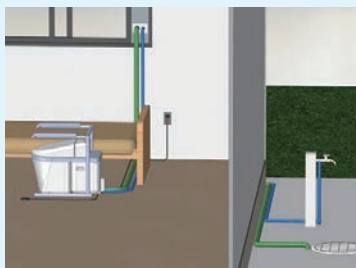

工事期間は半日～1日ほどです




③ ポンプユニット



レンタル でお借りいただきます

※介護保険の適用に対しては自治体によって判断が異なりますので事前にご相談ください。

接続工事は
おどろきの
短期間！
(1日)

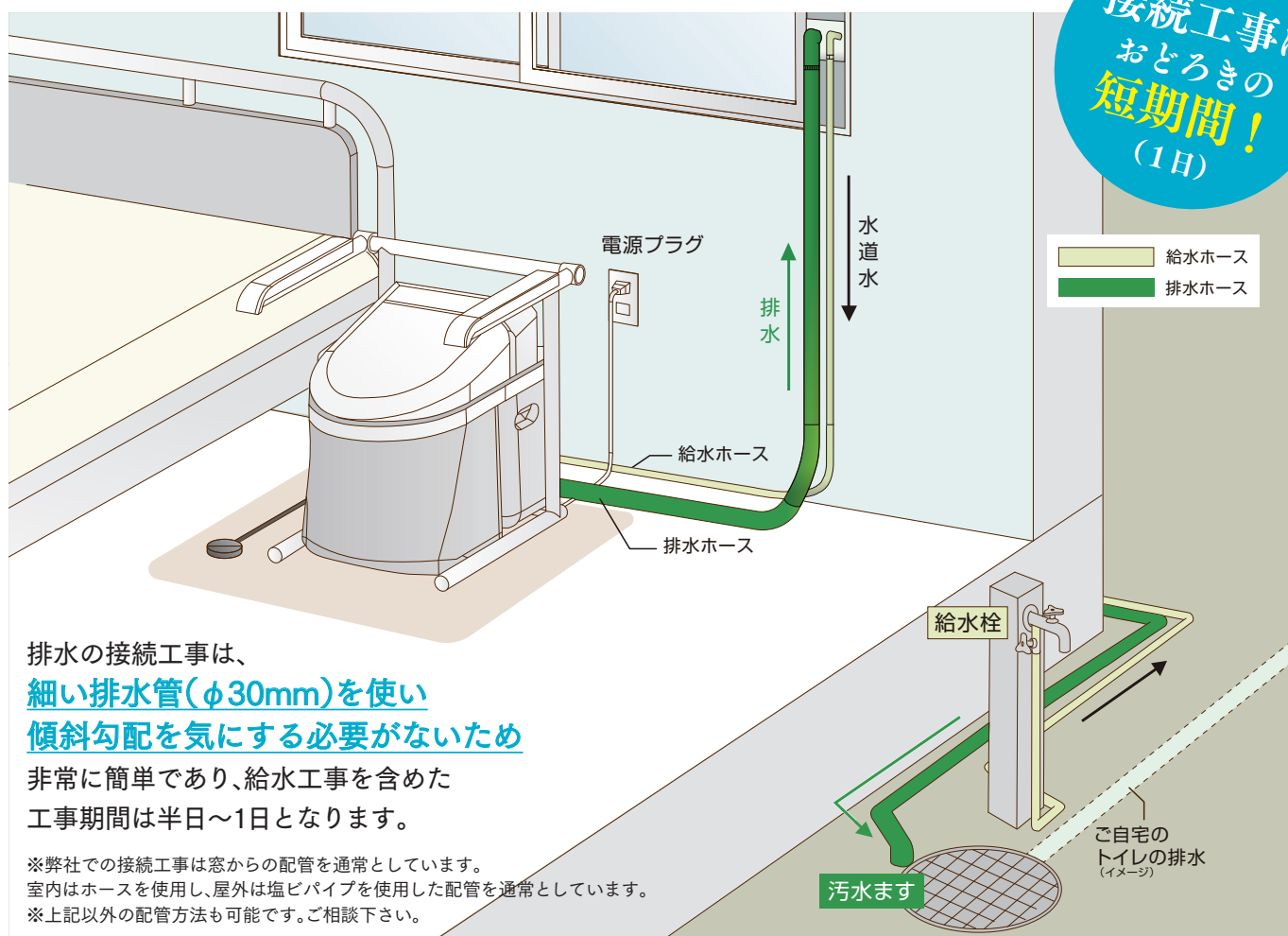

排水の接続工事は、
**細い排水管(φ30mm)を使い
傾斜勾配を気にする必要がないため**

非常に簡単であり、給水工事を含めた
工事期間は半日～1日となります。

※弊社での接続工事は窓からの配管を通常としています。
室内はホースを使用し、屋外は塩ビパイプを使用した配管を通常としています。
※上記以外の配管方法も可能です。ご相談下さい。


レンタルのメリットは？

導入費用が
安い ✨

ご利用中の
メンテナンスが
無料 ✨

ご利用後の機器の
引き取りサービスが
無料 ✨

施工事例

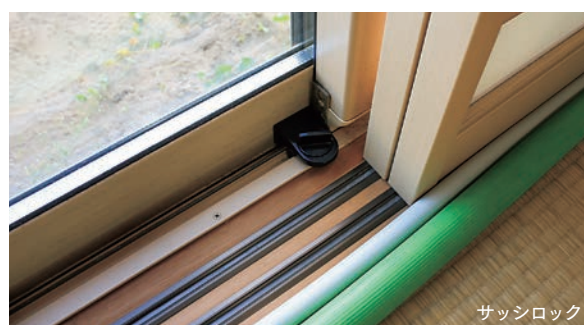

「アムのお約束」と「お客様へのお願い」

水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん」レンタルサービスをご検討いただきありがとうございます。つきましては、ご利用をお決めになる前にこの資料をお読みの上、アムのお約束と、お客様へのお願いをご確認いただきたいと思います。尚、ご不明の点などございましたら何なりとお問い合わせいただければ幸いです。

アムのお約束

💧 レンタル期間中の保証に関して

- ①万が一、ご使用中に不具合が発生した場合は無償で修理・交換を致します。
- ②レンタル期間中、故障が発生した場合は弊社からスタッフが3日以内にお伺い致します。
- ③流せるポータくんがご不要になりレンタルを終了する場合は、給排水設備を含め無償で撤去いたします。
- ④撤去時、ご購入いただいたポータブルトイレ部がご不要の場合は無償で引き取り処分をいたします。
- ⑤レンタル期間中、設置場所を変更することも可能です。 ※ホース長変更の場合は有料になります。

お客様へのお願い

💧 ご利用上の注意

- ①流せるポータくんは電気製品です。取扱説明書をよくお読みの上、ご利用下さい。
- ②汚物とトイレトーパー以外の物は流せません。
(ティッシュペーパー、掃除シート、ウェットティッシュ、尿漏れパッド、等は流せません)
- ③誤って異物を流し、詰まらせた場合は取扱説明書に従って取り除いて下さい。
- ④誤って流した物が取り除けない場合、弊社にてお伺いし除去致します。
尚、有料になる場合がありますので、異物は流さないようにご注意ください。
- ⑤お客様で本体を移動されたりする際、必ず給排水の接続部分の水漏れ確認をして下さい。

💧 冬季の凍結に関して

- ①冬季凍結の心配がある地域では凍結防止装置をご検討下さい。
凍結防止装置のご利用が無い場合の凍結に関してはメンテナンスの対象外となります。

💧 レンタル終了時のポータブルトイレ部(ご購入品)取り扱いに関して

- ①撤去時、ご購入いただいたポータブルトイレ部がご不要の場合は無償で引き取り処分をいたします。
- ②ポータブルトイレ部(ご購入品)がご入用の場合は、お客様へお引渡し致します。
ただし、製品はポータブルトイレ部とポンプユニットが連結されており、撤去作業時にその場でお返しする事が出来ませんので、一旦弊社へ持ち帰り改めてお返しする事になります。予めご了承下さい。

💧 その他ご購入前にご確認いただく事項

- ①流せるポータくんは床に固定しません。
- ②停電、断水時は使用できません。
- ③座位姿勢を保てない方は別途座位姿勢を保つ器具が必要です。
- ④使用者体重が80kgを超える方は使用できません。

株式会社 アム 福祉事業部

<http://www.pota-kun.jp> mail pota@am-co.co.jp

北 陸 本 社 〒929-0426 石川県河北郡津幡町竹橋西179-1

TEL 076-288-8655

埼玉営業所 TEL 049-299-8781

大阪営業所 TEL 072-479-2522

名古屋営業所 TEL 0568-42-9390



流せるポータくん

検索

お問い合わせ